

ミニシャワーチェアー グリーンマット

取扱説明書

1. 安全上の注意

- 1) 本品の改造をしないでください。
- 2) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
- 3) お湯をはった浴槽内では使用しないでください（浮き上がったりパイプ内に水が入ってしまうため）。
- 4) 脚部の破損や変形、転倒のおそれがありますので、座ったままで本品をひきずらないでください。
- 5) 転倒のおそれがありますので背もたれに体重をかけすぎないようにしてください。
（背もたれ付：HS4213）
- 6) 勢いよく座ると破損や変形、転倒のおそれがありますので、ゆっくりと腰掛けてください。
- 7) 座面の穴に指等を入れると抜けなくなるおそれがあります。
- 8) 本品についた汚れを落とす場合は、中性洗剤を希釈してご使用ください。
- 9) 踏み台のように本品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。

2. 製品概要

1) 材質

本体：アルミニウム

座面/背もたれ：ポリエチレン

座面マット・背もたれマット：EVA

HS4213



2) サイズ

【HS4213】

幅 420×奥行 450×高さ 600～700mm

座面サイズ：幅 420×奥行 240mm

座面高：325～425mm（25mm ピッチで 5 段階調節）

背もたれ高：300mm

【HS4212】

幅 420×奥行 380×高さ 325～425mm

座面サイズ：幅 420×奥行 240mm

座面高：325～425mm（25mm ピッチで 5 段階調節）

HS4212



3) 耐荷重：120kg

3. 組立方法



①座面をひっくり返して、脚部(4 本)を差し込んでください。




②座面をもとに戻して、背もたれ部を 2 箇所いっしょに差し込んでください(HS4213)。



注意

- 1) 必ず六角ビス等による固定にゆるみやガタつきがないか確認してください。固定にゆるみやガタつきがある場合は、六角ビス等を増し締めしてください。増し締め後もゆるみやガタつきがある場合は絶対に使用しないでください。
- 2) 高さ調節の際は、脚部のプッシュボタン 4 箇所を脚先が同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本品が傾き、転倒するおそれがあります。
- 3) 本品には、プッシュボタンによる固定が[背もたれ無]で 8 箇所、[背もたれ付]で 10 箇所ありますので、プッシュボタンがすべて固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
- 4) プッシュボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったんパイプ(下部)を引き抜き、再度調節してください。
- 5) 足ゴムが外れたりずれないように、脚部が床面と平行になるよう足ゴムを回して調整し、しっかり固定してください。

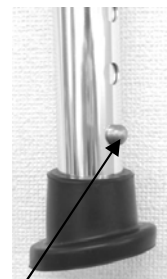

プッシュボタンが大きく飛び出た状態

4. 保管方法

- 1) 腐食の原因となりますので、水を切って乾燥させてください。
- 2) 湿気の少ない場所で保管してください。

※保管する前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>

注文コード	品番	商品名
502-022-16	HS4213	ミニシャワーチェア背もたれ付, グリーンマット(5 段階調節, 25mm ビッチ)
502-022-17	HS4212	ミニシャワーチェア背もたれ無し, グリーンマット, (5 段階調節, 25mm ビッチ)